



Risultati
fisiologici
reali, per
riscoprire
un corpo
da favola.



TECNOLOGIA
D'ECCELLENZA
MADE IN ITALY

diry e+

ADVANCED TECHNOLOGY,
UNLIMITED POSSIBILITIES.



Airy e+

Una coccola di bellezza e benessere.

Airy E+ contrasta gli inestetismi della cellulite, rimodellando la silhouette e restituendo tono ed elasticità ai tessuti grazie all'azione combinata e contemporanea di tre tecnologie:

- MASSAGGIO ENDODERMICO,
- RADIOFREQUENZA RESISTIVA
- LASER LLLT

Grazie a manipoli di differenti misure, Airy E+ si adatta alle zone da trattare e può essere usato efficacemente su tutte le parti del corpo: braccia, schiena, addome, gambe, glutei, cuote de cheval e viso. Il trattamento è una piacevole coccola di bellezza e benessere con effetti fisiologici fin dalla prima seduta.

La sinergia di tre tecnologie.

VACUUM - MASSAGGIO ENDODERMICO

Azione di contrasto agli inestetismi della cellulite e rimodellamento della silhouette.

La tecnologia vacuum Airy E+ è particolarmente indicata per gli inestetismi della pelle "a buccia d'arancia", per l'invecchiamento cutaneo e per la riattivazione della circolazione.

L'applicazione dell'azione aspirante modulata produce un benefico **effetto drenante, tonificante e rimodellante**; favorisce un aumento dell'elasticità cutanea e agisce contro l'inestetismo della cellulite.

La stimolazione meccanica delle cellule permette di riattivare i loro processi, in modo naturale e indolore. Non vi sono particolari controindicazioni di applicazione. Grazie al suo effetto massaggio risulta essere un trattamento piacevole e rilassante.

RADIOFREQUENZA RESISTIVA

Ringiovanimento cutaneo

La radiofrequenza resistiva di Airy E+ migliora in modo sostanziale la consistenza della pelle, grazie alla sua azione diretta sulle fibre di collagene, le quali costituiscono la struttura stessa della pelle.

L'effetto è immediato e progressivo; il miglioramento del derma è visibile sin dal primo trattamento ma ancora di più nei giorni successivi in seguito alla sintesi di nuovo collagene prodotto dalla riattivazione e dall'incremento dell'attività dei fibroblasti. La sua interazione termica aiuta la tonificazione tissutale, un effetto lifting, il recupero delle lassità cutanee nonché un ringiovanimento della pelle.

LASER LLLT

Azione modellante e snellente

La tecnologia laser LLLT di Airy E+ opera principalmente sull'inestetismo della cellulite e sulla massa grassa.

L'azione della tecnologia laser LLLT sulla silhouette contribuisce ad una riduzione delle lassità cutanee, garantendo il recupero della tonicità tissutale attraverso la stimolazione del collagene.






Airy e+

PERFETTO
SIA PER IL CORPO
CHE PER IL VISO:

- MIGLIORAMENTO SULLE ADIPOSITÀ LOCALIZZATE;
- CONTRASTA L'INestetISMO DELLA CELLULITE;
- RASSODA E RESTITUISCE ELASTICITÀ E TONO ALLA PELLE;
- RIMODELLA LA SILHOUETTE;
- RIDUCE LE RUGHE SOTTILI;
- RIDEFINISCE L'OVALE DEL VISO;
- RESTITUISCE LUMINOSITÀ E TONICITÀ ALLA PELLE.

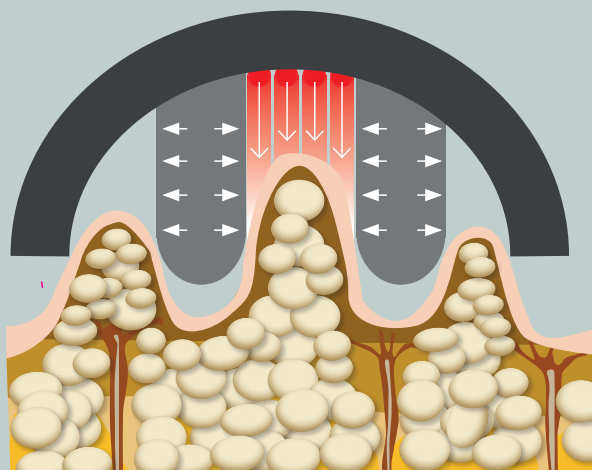

Grazie a un protocollo personalizzato di rimodellamento e contrasto all'inetetismo della cellulite nella zona glutei la cliente ha ottenuto questi risultati in 10 sedute.



Grazie ad un protocollo personalizzato di rimodellamento e tonificazione localizzato nell'area addominale la cliente ha ottenuto questi risultati in 10 sedute.



Processo di interazione fisiologica tra il manipolo di Airy e i tessuti corporei.

3 tecnologie per 3 interazioni con il corpo: **interazione meccanica data dal vacuum**, **interazione ottica data dal laser LLLT** e **interazione termica data da RF resistiva** che si traduce in differenti stimoli per il corpo al fine di ottenere tonificazione tissutale e un rimodellamento corporeo total body. Grazie al movimento sul tessuto del manipolo e alla disposizione organizzata degli elementi (elettrodi, sorgenti LLLT e fori aspiranti) ogni mm dei tessuti è toccato da tutte le tecnologie di Airy ripetute volte per massimizzare gli effetti desiderati.

Armonia per il corpo

I due manipoli corpo di differenti dimensioni permettono di trattare in sicurezza tutte le zone, ottenendo risultati straordinari nel rimodellamento e un significativo miglioramento dell'area adiposa e degli inestetismi della cellulite.

RIMODELLAMENTO E CONTRASTO AGLI INESTETISMI DELLA CELLULITE.

Mentre il massaggio endodermico provoca un effetto tonificante e rimodellante, l'azione del soft laser stimola l'attività cellulare, contribuendo ad una riduzione centimetrica e ad una silhouette ridefinita. Il calore indotto dalla radiofrequenza, invece, favorisce un effetto drenante, così da massimizzare gli effetti della tecnologia e rimodellare i punti critici.

MIGLIORAMENTO DELLA TRAMA CUTANEA

Il massaggio endodermico aumenta l'elasticità cutanea e agisce contro l'inestetismo della cellulite, mentre l'effetto termico migliora la consistenza della pelle e tonifica, agendo sulle lassità cutanee per un completo ringiovanimento.

Armonia per il viso

Il manipolo viso grazie alla sinergia delle 3 tecnologie permette di trattare in maniera più precisa ed efficace tutte le aree del viso, del collo e del décolleté.

Airy favorisce anche un'azione anti-aging. Permette infatti di levigare, tonificare e ridensificare la pelle del viso attenuando le rughe sottili, assottigliando i contorni, ridisegnando l'ovale e ridonando luminosità all'incarnato senza alcuna azione aggressiva.

Gli effetti di Airy E+:

- riduce le rughe sottili;
- ridefinisce l'ovale del viso;
- restituisce luminosità e tonicità alla pelle.






PROGRAMMI PER OGNI INESTETISMO

L'estrema semplicità di utilizzo del software consente di scegliere tra 6 programmi corpo, 1 programma viso, 1 programma completamente personalizzabile per le operatrici più esperte e un programma ad azione costante. Ogni programma può essere modificato in base all'esperienza dell'utilizzatore e a seconda delle esigenze del cliente trattato.

- 1 programma VISO
- 1 programma BRACCIA
- 1 programma ADDOME
- 1 programma SCHIENA
- 1 programma COSCE
- 1 programma GLUTEI & COULOTTE DE CHEVAL
- 1 programma POLPACCI & POSTERIORE COSCE
- 1 programma PERSONALIZZABILE

IL DESIGN

Airy E+ gode di un design elegante e innovativo, sui toni del bianco e del grigio. La scocca, più ergonomica della versione precedente, dispone di braccia per l'aggancio semplice e veloce dei manipoli e consente di risparmiare spazio. Il display touch screen è stato completamente rivisto per un utilizzo più immediato.

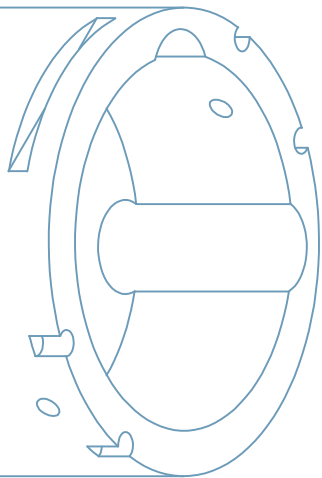



Qualità elettro-medicale certificata



La Cesare Quaranta Srl è un'azienda italiana che progetta e produce tecnologie elettro-medicali.

L'azienda gode di due certificazioni ISO:

ISO 9001:2015:

Progettazione, produzione e assistenza di dispositivi elettromedicali per dermatologia e medicina estetica. Progettazione e produzione e assistenza di apparecchiature elettroniche per il settore estetico.

Commercializzazione e vendita di prodotti cosmetici.

ISO 13485:2016:

Progettazione, produzione e assistenza di dispositivi elettromedicali per dermatologia e medicina estetica.



Ogni dispositivo viene prodotto nei nostri laboratori di Chieri (TO) con strumenti all'avanguardia e grazie ai migliori test di affidabilità.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione	230 Vac, 50/60 Hz
Potenza assorbita	250 VA

VACUUM

Pompa a vuoto	
Pressione nominale finale	150 mBar (abs)
Capacità nominale di aspirazione	3 3,6 m3/h

Modi di funzionamento	Aspirazione continua Aspirazione intermittente Possibilità di modulare l'aspirazione (funzione "vibrazione")
-----------------------	--

RADIOFREQUENZA

Modalità	Resistiva
Frequenza	500 kHz
Potenza	<25 W

LASER INFRAROSSO

Numero di sorgenti	4
Lunghezza d'onda	655 nm
Potenza IN diodo	28 mW
Potenza OUT Totale	<20 μ W
Classe	1C

Fusibili di rete	3,15 A - Ritardato - 5 x 20
Dimensioni	1350 x 450 x 440mm
Peso	25 kg
Classificazione	I, tipo BF
Conformità	Direttiva 2014/30/UE Direttiva 2014/35/UE Direttiva 2011/65/UE
Temperatura di lavoro	12° 30° C
Umidità relativa	30 - 75%, senza condensa

NB: Il Costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche, al fine di migliorare il prodotto, senza preavviso alcuno.



TECNOLOGIA
D'ECCELLENZA
MADE IN ITALY



C E S A R E
Q U A R A N T A

CESARE QUARANTA s.r.l - Unipersonale

Via Legnanino, 5 - 10023 Chieri (TO) Italy - Tel. +39 0119472132

www.cesarequaranta.it - e-mail: info@cesarequaranta.it