



Risultati
fisiologici
reali, per
riscoprire
un corpo
da favola.



TECNOLOGIA
D'ECCELLENZA
MADE IN ITALY

diry e+

ADVANCED TECHNOLOGY,
UNLIMITED POSSIBILITIES.



C E S A R E
Q U A R A N T A

Airy e+

Una coccola di bellezza e benessere.

Airy E+ contrasta gli inestetismi della cellulite e gli accumuli adiposi, restituendo tono ed elasticità ai tessuti grazie all'azione combinata e contemporanea di tre tecnologie:

- MASSAGGIO ENDODERMICO,
- RADIOFREQUENZA RESISTIVA
- LASER LLLT

Grazie a manopole di differenti misure, Airy E+ si adatta alle zone da trattare e può essere usato efficacemente su tutte le parti del corpo: braccia, gambe, glutei, addome, viso e decolté. Il trattamento è una piacevole coccola di bellezza e benessere con effetti evidenti fin dalla prima seduta.

La sinergia di tre tecnologie.

VACUUM - MASSAGGIO ENDODERMICO ASPIRATO

Azione di contrasto delle adiposità localizzate e della cellulite.

La tecnologia vacuum Airy E+ è particolarmente indicata per gli inestetismi della pelle “a buccia d’arancia”, per l’invecchiamento cutaneo e per la riattivazione della circolazione venosa e arteriosa.

La pressione a vuoto esercitata dal manipolo può essere selezionata:

- in modalità continua per intervenire sulla cellulite edematosa e/o sulla ritenzione idrica;
- in modalità intermittente per agire sulla cellulite compatta e/o sulle adiposità localizzate.

L’azione principale del massaggio endodermico è quindi la redistribuzione delle adiposità in seguito all’aspirazione profonda e intensa dei tessuti cutanei e sottocutanei e il loro successivo rilascio, con una fase più dolce e rilassante.

RADIOFREQUENZA RESISTIVA

Effetto anti-invecchiamento

La radiofrequenza resistiva di Airy E+ migliora in modo sostanziale la consistenza della pelle, grazie alla sua azione diretta sulle fibre di collagene, le quali costituiscono la struttura stessa della pelle.

L’effetto è immediato e progressivo; il miglioramento del derma è visibile sin dal primo trattamento ma ancora di più nei giorni successivi in seguito alla sintesi di nuovo collagene prodotto dalla riattivazione e dall’incremento dell’attività dei fibroblasti. L’ipertermia, ossia il forte aumento della temperatura corporea creata dalla radiofrequenza, invece, riattiva la vascolarizzazione favorendo un’efficace azione detossinante e il drenaggio dei liquidi immagazzinati.

LASER LLLT

Azione modellante e snellente

La tecnologia laser LLLT di Airy E+ opera principalmente sull’inestetismo della cellulite e sui tessuti adiposi.

La luce laser è in grado di attraversare la barriera cutanea e sollecitare reazioni fotochimiche nel tessuto bersaglio, attivando così la lipolisi degli adipociti e causando reazioni a catena.

Il laser LLLT aumenta il gradiente di concentrazione della membrana del citocromo, gli scambi di ATP e la loro sintesi e converte i trigliceridi in acidi grassi e glicerolo, permettendo loro di attraversare la membrana cellulare e di essere eliminati.






Airy e+

PERFETTO
SIA PER IL CORPO
CHE PER IL VISO:

- RIDUCE GLI ACCUMULI ADIPOSI;
- CONTRASTA L'INestetISMO DELLA CELLULITE;
- RASSODA E RESTITUISCE ELASTICITÀ E TONO ALLA PELLE;
- RIMODELLA LA SILHOUETTE;
- RIDUCE LE RUGHE SOTTILI;
- DEFINISCE L'OVALE DEL VISO;
- RESTITUISCE LUMINOSITÀ E TONICITÀ ALLA PELLE.

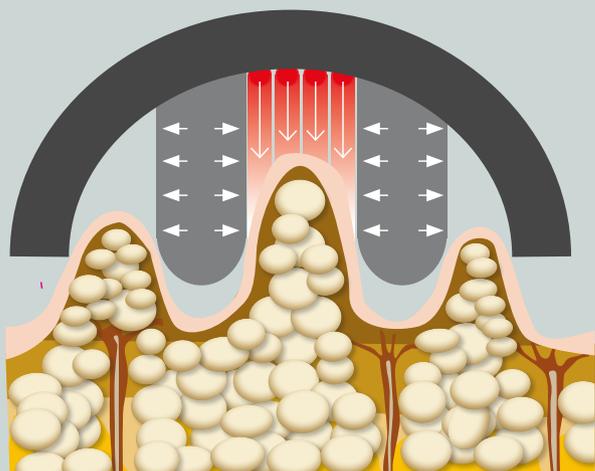

Grazie a un protocollo personalizzato di rimodellamento e contrasto all'inetestismo della cellulite nella zona glutei la cliente ha ottenuto questi risultati in 10 sedute.



Grazie ad un protocollo personalizzato di rimodellamento e tonificazione localizzato nell'area addominale la cliente ha ottenuto questi risultati in 10 sedute.



Processo di interazione fisiologica tra il manipolo di Airy e i tessuti corporei (adiposo e connettivo).

Il vacuum permette l'aspirazione di tre aree adiacenti separate tra loro grazie agli elettrodi della radiofrequenza posti perpendicolarmente; questa permette sviluppo di calore endogeno nei tessuti circostanti svolgendo un effetto mirato; il lavoro svolto dalla radiofrequenza e dal vacuum è enfatizzato dalle quattro sorgenti LLLT situate nella camera centrale del manipolo. Grazie al movimento sul tessuto del manipolo e alla disposizione organizzata degli elementi (elettrodi, sorgenti LLLT e fori aspiranti) ogni mm dei tessuti è toccato da tutte le tecnologie di Airy ripetute volte per massimizzare gli effetti desiderati.

Armonia per il corpo

I due manipoli corpo di differenti dimensioni permettono di trattare in sicurezza tutte le zone, ottenendo risultati straordinari nel rimodellamento e una significativa riduzione dell'adipe e degli inestetismi della cellulite.

LIPOMODELLAZIONE E CONTRASTO DELLA CELLULITE.

Mentre il massaggio endodermico provoca la mobilizzazione e lo scollamento degli adipociti dal tessuto connettivo, le cellule adipose sono sottoposte all'irradiazione di quattro sorgenti laser LLLT a 780 nm. Questa azione combinata aumenta la permeabilità della membrana, stimolando la fuoriuscita dei lipidi nella matrice extracellulare. Il calore indotto dalla radiofrequenza, invece, migliora il flusso circolatorio favorendo il drenaggio dei liquidi di ristagno, responsabili dell'inestetismo della cellulite, e dei lipidi liberati negli spazi interstiziali.

MIGLIORAMENTO DELLA TRAMA CUTANEA

Il massaggio endodermico distende il tessuto connettivo e le fibre di collagene, che subiscono una denaturazione a causa dell'azione della radiofrequenza, con conseguente riattivazione della produzione di nuovo collagene ed elastina da parte dei fibroblasti. L'effetto termico migliora la vascolarizzazione dei tessuti periferici e la loro ossigenazione, restituendo tonicità e colore alla pelle. Il risultato è un rapido miglioramento della trama cutanea.

Armonia per il viso


Il manipolo viso grazie alla sinergia delle 3 tecnologie permette di trattare in maniera più precisa ed efficace tutte le aree del viso, del collo e del décolleté.

Il massaggio endodermico, la radiofrequenza resistiva e il laser LLLT lavorano contemporaneamente contribuendo a riattivare e ristrutturare il tessuto connettivo, a rassodare la pelle del viso e a incrementare la microcircolazione e l'ossigenazione dei tessuti. Il risultato è un immediato rimodellamento dell'ovale del viso, con una evidente riduzione delle rughe sottili fin dalla prima seduta. La pelle ritrova la giusta elasticità e luminosità, soprattutto nelle zone in cui appare più fragile e atona.

Gli effetti di Airy E+:

- riduce le rughe sottili;
- definisce l'ovale del viso;
- restituisce luminosità e tonicità alla pelle.




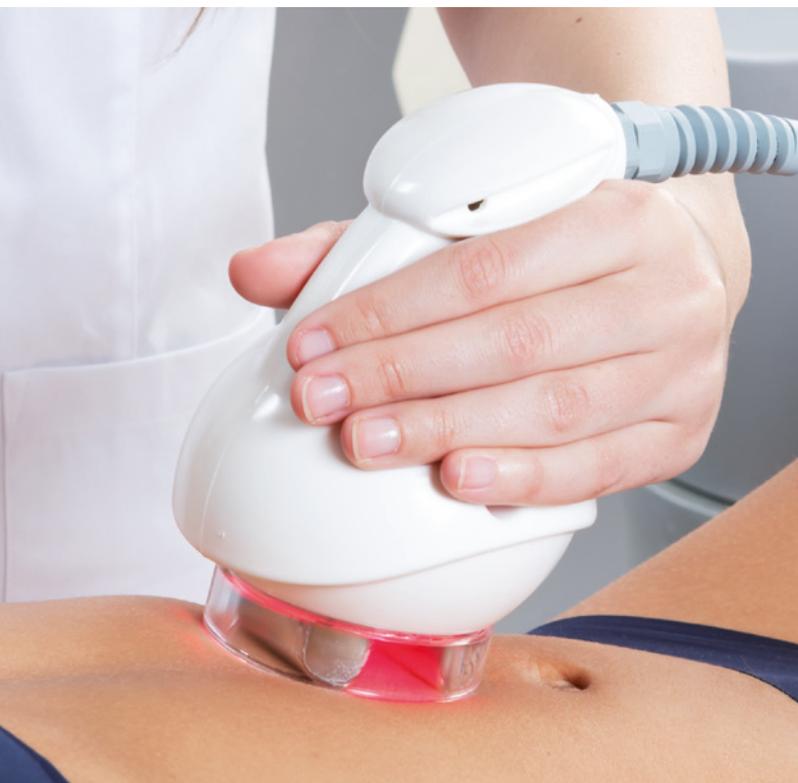

PROGRAMMI PER OGNI INESTETISMO

L'estrema semplicità di utilizzo del software consente di scegliere tra 6 programmi corpo, 1 programma viso, 1 programma completamente personalizzabile per le operatrici più esperte e un programma ad azione costante. Ogni programma può essere modificato in base all'esperienza dell'utilizzatore e a seconda delle esigenze del cliente trattato.

- 2 programmi per elettrostimolazione con elettrodi viso
- 1 programma VISO
- 1 programma BRACCIA
- 1 programma ADDOME
- 1 programma SCHIENA
- 1 programma COSCE
- 1 programma GLUTEI & COULOTTE DE CHEVAL
- 1 programma POLPACCI & POSTERIORE COSCE
- 1 programma PERSONALIZZABILE

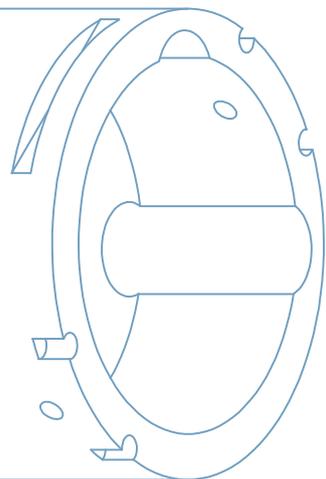

IL DESIGN

Airy E+ gode di un design elegante e innovativo, sui toni del bianco e del grigio. La scocca, più ergonomica della versione precedente, dispone di braccia per l'aggancio semplice e veloce dei manipoli e consente di risparmiare spazio. Il display touch screen è stato completamente rivisto per un utilizzo più immediato.





CESARE
QUARANTA

CESARE
QUARANTA

Qualità elettro-medicale certificata



La Cesare Quaranta Srl è un'azienda italiana che progetta e produce tecnologie elettro-medicali.

L'azienda gode di due certificazioni ISO:

ISO 9001:2015:

Progettazione, produzione, assistenza ed immissione in commercio di dispositivi elettromedicali per dermatologia e medicina estetica.
Progettazione, produzione, assistenza ed immissione in commercio di apparecchiature elettroniche per il settore estetico.
Commercializzazione e vendita di prodotti cosmetici.

ISO 13485:2016:

è conforme alla norma UNI CEI EN ISO 13485:2021 per i seguenti prodotti/servizi:
Progettazione, produzione, assistenza ed immissione in commercio di dispositivi elettromedicali per dermatologia e medicina estetica.

Ogni dispositivo viene prodotto nei nostri laboratori di Chieri (TO) con strumenti all'avanguardia e grazie ai migliori test di affidabilità.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione 230 Vac, 50/60 Hz

Potenza assorbita 250 VA

VACUUM

Pompa a vuoto
Pressione nominale finale 150 mBar (abs)
Capacità nominale di aspirazione 3 3,6 m3/h

Modi di funzionamento Aspirazione continua
Aspirazione intermittente
Possibilità di modulare l'aspirazione (funzione "vibrazione")

RADIOFREQUENZA

Modalità Resistiva

Frequenza 500 kHz

Potenza $\leq 25 W$

LASER INFRAROSSO

Numero di sorgenti 4

Lunghezza d'onda 780 nm

Potenza IN diodo 5 mW

Potenza IN Totale 20 mW

Densità di potenza $\leq 10 mW/cm^2$

Classe III R

Fusibili di rete 3,15 A - Ritardato - 5 x 20

Dimensioni 1350 x 450 x 440mm

Peso 25 kg

Classificazione I, tipo BF

Conformità Direttiva 2014/30/CE

Temperatura di lavoro 12° 30° C

Umidità relativa 30 - 75%, senza condensa



NB: Il Costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche, al fine di migliorare il prodotto, senza preavviso alcuno.

Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche, al fine di migliorare il prodotto, senza preavviso alcuno


TECNOLOGIA
D'ECCELLENZA
MADE IN ITALY



CESARE
QUARANTA

CESARE QUARANTA s.r.l - Unipersonale
Via Legnanino, 5 - 10023 Chieri (TO) Italy - Tel. +39 0119472132
www.cesarequaranta.it - e-mail: info@cesarequaranta.it